

medicinelaser  
LATAM

# IntelliStudio®

Sistema de mapeo  
corporal  
automatizado para  
la documentación y  
análisis de lesiones  
dermatológicas.



DermaGraphix®



*Capture fotografías de todo  
el cuerpo con calidad de  
estudio, tanto estándar como  
con polarización cruzada, en  
menos de **2 minutos**.*

IMAGING EXCELLENCE FROM

 **CANFIELD**




# DermaGraphix solución de mapeo corporal




## Captura totalmente automatizada de fotografías de mapas corporales.

*Las plantillas de captura DermaGraphix controlan la configuración de la cámara y guían las posturas del paciente, mientras que el elevador motorizado programable garantiza posiciones e iluminación repetibles de la cámara para fotografías consistentes de todo el cuerpo con una capacitación mínima del personal.*

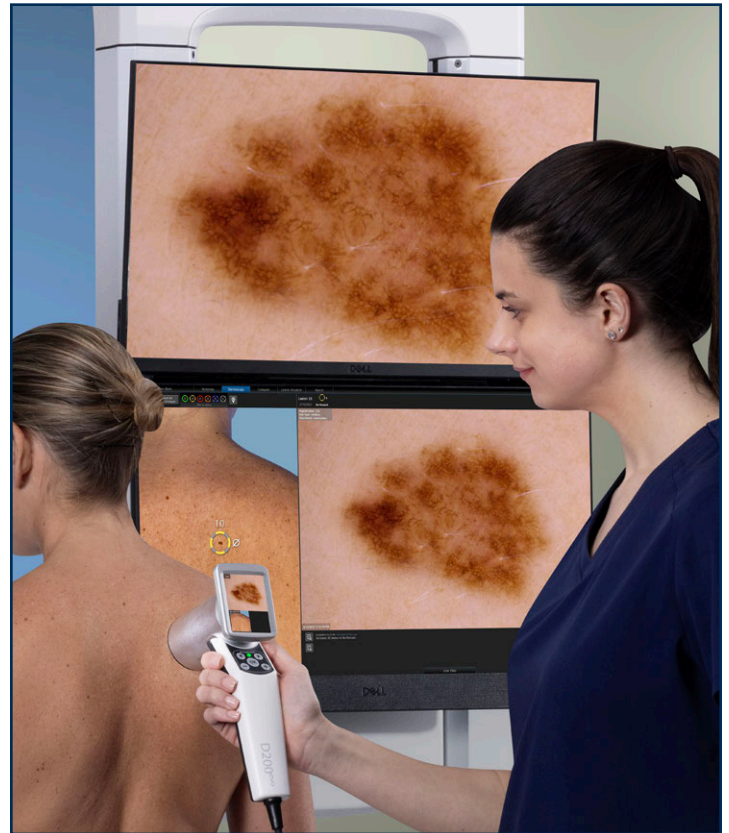

## Capture imágenes dermatoscópicas etiquetadas en el mapa corporal.

*Todas las imágenes dermatoscópicas asociadas a una lesión están vinculadas a un número único generado automáticamente y etiquetado en el mapa corporal para realizar exámenes eficientes y seguimientos precisos guiados por el flujo de trabajo.*

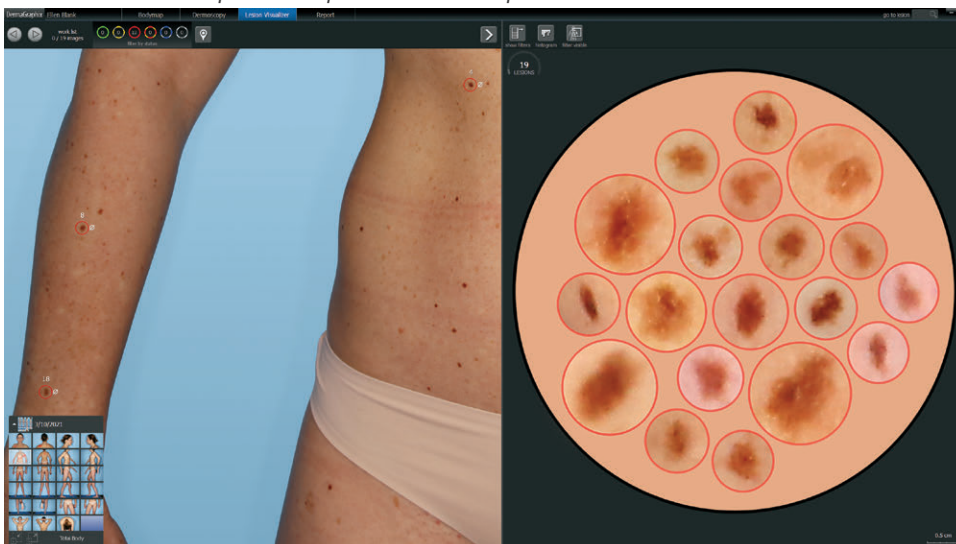


**DermaGraphix** puede localizar lesiones en la imagen general según el propio criterio del médico (borde, asimetría, color). El modo de diagrama en espiral puede usarse como una segunda mirada para el "patito feo" o por el personal médico para ayudar en la selección de lesiones para la dermatoscopia.

Mejore la eficiencia con

- Software EMR a través de interfaces HL7
- DICOM MWL y visualización remota
- Control directo de VivaScope® RCM




# Revisión simple pero poderosa de imágenes generales y de dermatoscopia.

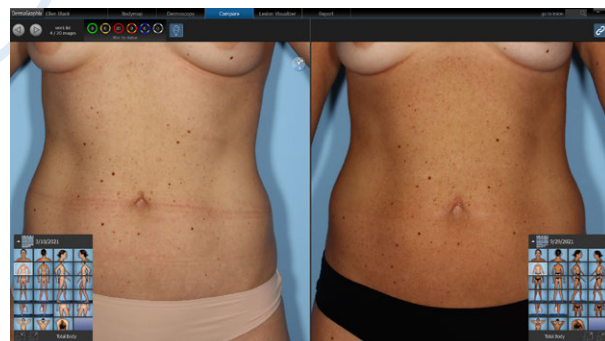

**Seguimiento sin marcadores de Canfield** automáticamente alinea las superficies de la piel a partir de dos mapas corporales que revelan lesiones nuevas y cambiantes.

**Fácil vigilancia de imágenes dermatoscópicas.**  
La comparación de pantalla completa entre puntos temporales incluye todas las modalidades de iluminación y captura de imágenes.

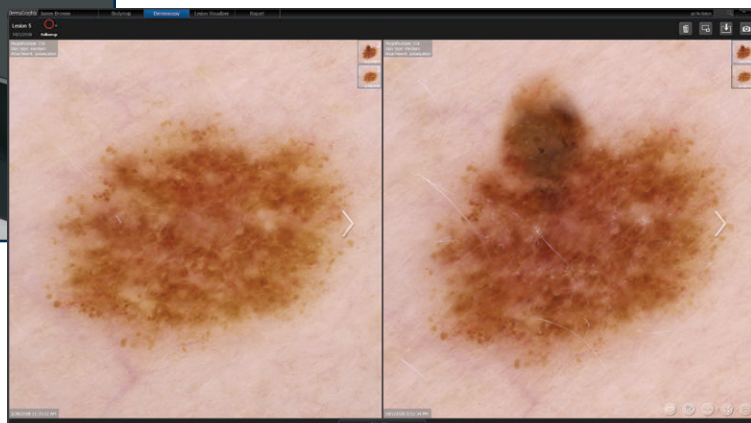

## Revisiones más rápidas con datos mejor organizados

DermaGraphix Dashboard organiza imágenes de dermatoscopia para una revisión y evaluación óptimas, con la misma lesión en una sola columna y la misma visita en una sola fila.




**ViewMyConsult®** permite a los pacientes comprobar si hay cambios entre las visitas al consultorio. En la privacidad de su propio hogar, su paciente puede acceder a su descripción general y a sus imágenes de primer plano a través de un portal web seguro que cumple con HIPAA y con autorización multifactor.

También disponible como visor de pacientes exportable para Windows® o macOS®.

## Informes de lesiones

**imprimibles** con 3 puntos,  
Resultados de evaluación de 7 puntos y reglas  
ABCD, notas clínicas para facturación y  
cumplimiento de derivaciones de pacientes.  
Ícono de validado por la comunidad

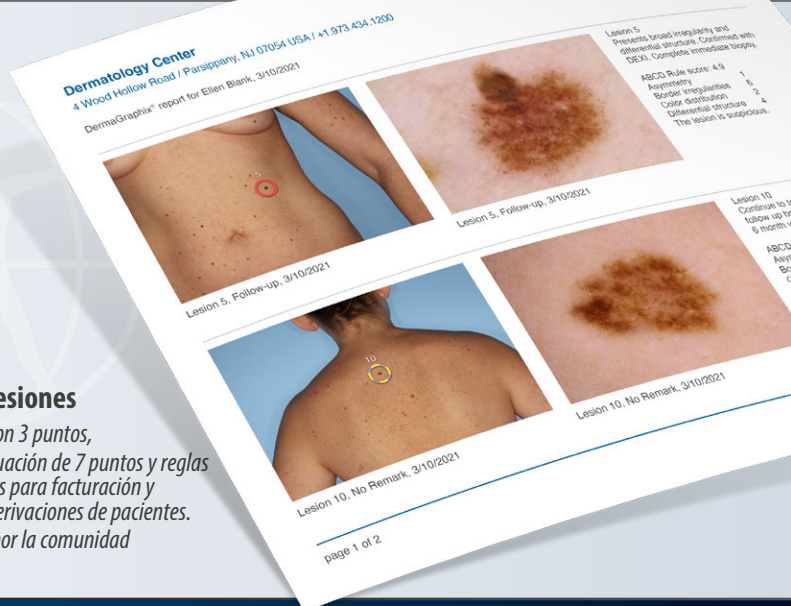

# IntelliStudio®


**La iluminación LED con calidad de estudio** está calibrada y equilibrada para obtener imágenes de la piel.

**La cámara de 45MP** con sensor de fotograma completo permite una gran ampliación de los rasgos más pequeños de la piel.



**La iluminación no polarizada y con polarización cruzada** revela los rasgos de la piel.

Ambos modos de iluminación se capturan secuencialmente en menos de un segundo, lo que permite un registro perfecto.

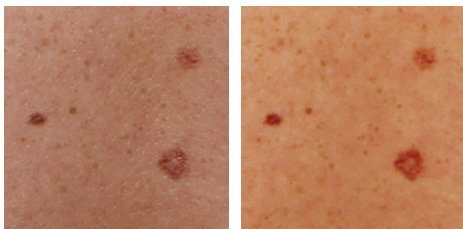

**Las plantillas estandarizadas** controlan la configuración de la cámara y guían las posturas del paciente.


**El elevador motorizado programable** garantiza posiciones e iluminación repetibles de la cámara.

**Guías de secuenciación automatizadas** al usuario a través de capturas, sin necesidad de habilidades fotográficas especiales.

**La superposición MatchPose®** garantiza imágenes registradas de antes y después.

**El zoom programable** maximiza la resolución de la imagen para imágenes de rostros y otras capturas de campo más pequeñas.

**Vídeo con iluminación LED** y capacidades de grabación, reproducción y zoom.

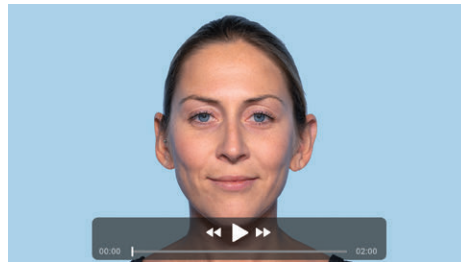


**Los algoritmos de reconocimiento facial**

garantizan que el rostro del paciente se reconozca automáticamente, configurando la altura de la cámara para un posicionamiento rápido y repetible del paciente.

## D200<sup>evo</sup>

**Dermatoscopio digital de alta resolución: calidad, flexibilidad y eficiencia, todo en un sistema portátil**

- Aumento de 15 a 200x
- Iluminación polarizada y no polarizada
- Etiquete y capture usando la pantalla táctil y el teclado para fotografías de dermatoscopia sin computadora
- Capture fotografías clínicas y dermatoscópicas.

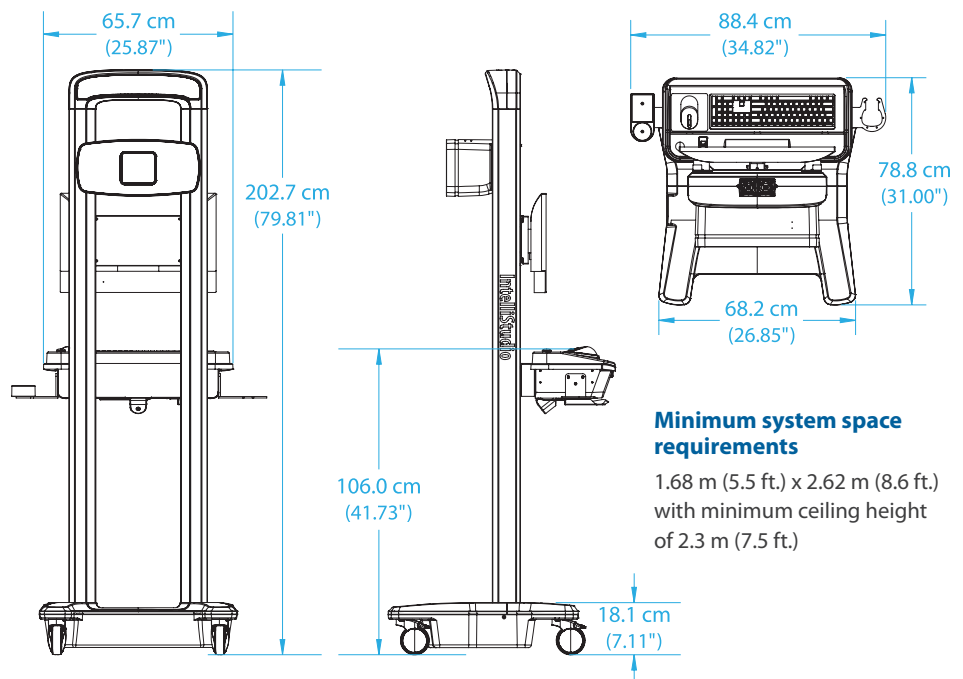

**CANFIELD**

IMAGING EXCELLENCE FROM

**OFICINAS CENTRALES**

**medicinelaser**  
LATAM

[www.medicinelaser.com](http://www.medicinelaser.com)



ARGENTINA  
Av. Doctor Honorio  
Pueyrredón 707, Caballito,  
CABA, Argentina.  
M: +54 11 3404 7158

CHILE  
Sucre 1355, Ñuñoa,  
Santiago, Chile.  
O: +56 2 2269 1981  
M: +56 9 4409 7105

ECUADOR  
Av. República 1058,  
Edificio La Fontana,  
Quito, Ecuador.  
M: +593 99 120 4597

PERÚ  
Calle Almirante Lord  
Cochrane 322,  
Miraflores, Lima, Perú.  
O: + 51 1 704 80 14  
M: +51 983 552 813

[ventas@medicinelaser.com](mailto:ventas@medicinelaser.com)